



Confidence in posture solutions

Azalea® Tall



Le confort pour les
utilisateurs de grande taille



Le fauteuil **Rea Azalea Tall** a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs de grande taille grâce notamment à une profondeur et une hauteur d'assise supérieures au reste de la gamme. Développé sur la base du fauteuil **Rea Azalea**, le **Rea Azalea Tall** profite de la même fiabilité et du système d'inclinaison à translation. Le **Rea Azalea Tall** offre un grand confort et une bonne stabilité. Le dossier **Flex 3** apporte un meilleur positionnement. 5 coloris de châssis et 3 revêtements d'assise et de dossier sont disponibles.

Caractéristiques et options

Inter-compatibilité



Le **Rea Azalea Tall** possède toutes les caractéristiques du **Rea Azalea** telles que la bascule d'assise à translation pour une inclinaison stable. Tous les accessoires sont compatibles avec l'**Azalea Tall**. Disponible également en version Assist (roues arrière de 16")

Plaque d'assise rallongée

La profondeur d'assise est rallongée de 50 mm pour s'adapter aux grands segments jambiers.

Longueur du châssis

Le châssis est rallongée de 50 mm pour offrir plus de stabilité à l'utilisateur.

Hauteur d'assise

La hauteur d'assise est réhaussée de 50 mm pour s'adapter à des segments jambiers plus longs.

Facilement manoeuvrable

La barre à pousser est ergonomique et réglable afin de s'adapter aux préférences de la tierce-personne.

Données techniques

Pour les personnes ayant une déficience visuelle, toutes les informations sont disponibles sur www.invacare.fr.


	Largueur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise avant	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Pente d'assise	Angle de dossier
Rea Azalea Tall	390-440/440-490/ 490-540 mm (390-490/440-540/ 490-590 mm)	480 - 550 mm	500 mm	Plaque de dossier: 560 - 790 mm Dossier réglable en tension: 540 - 715 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° à 23° +1° à 25°	0° - 30°
	Largueur hors-tout	Hauteur hors-tout	Longueur hors-tout avec potences	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur	Poids de transport	Crash-testé	Pente maximale pour l'utilisation des freins de parking
Rea Azalea Tall	Largueur d'assise: + 220mm	1000 - 1300 mm	950 - 1085 mm	34kg (Pour largeur d'assise 440mm)	Max 135 kg	18,7 kg ¹	ISO 7176-19	7°

1. + 4,2 kg pour un fauteuil équipé de l'option inclinaisons d'assise et de dossier électriques

Coloris du châssis



Revêtement du siège

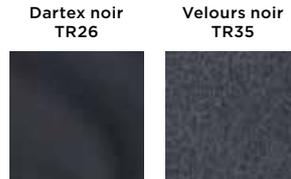

Tél. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch - 37230 Fondettes
France



© 2019 Invacare International Sàrl. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.
Rea, Rea design et DSS design sont des marques déposées par Invacare International. Le **Rea Azalea Tall** est conçu avec le DSS (Dual Stability System).
Il fournit à l'utilisateur une meilleure stabilité et sécurité lors de l'inclinaison d'assise ou de dossier. Rea Azalea Tall - FR - 03/2019